



Humanwater

ヒューマンウォーター HU-150

電解水素水生成器

管理医療機器

効果・効能 | 胃腸症状の改善

指定管理医療機器製造販売認証番号: 第230AFBZX00004000号

胃もたれや、胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

あなたの暮らしにとけ込む 家族全員が使いやすい シンプルなデザイン。

どんなキッチンに置いても、スッキリと空間にとけこむデザイン
ご家族のみんなが、自然に使いつづけられる使い勝手
美しさと機能性を合わせもつHU-150





電解水素水とは？

一言でいうと、水を分解して生まれるアルカリ性の水素水のことです。水素は還元作用を持つと言われています。水を電気分解すると、マイナス極側(陰極側)に水素が発生し、水酸化物イオンやカルシウムイオンなどの陽イオンが多くなることで、電解水素水(アルカリ性の水素水)が生成されるのです。

健康

HEALTH



胃腸の働きを整える、
健やかな水。

料理

COOKING



おいしい料理に、
欠かせない、おいしい水。

美肌

SKINCARE



洗顔や食器洗いに最適、
肌にやさしい水。

安心


SAFETY



快適な毎日を支える、
クリーンな水。

「ヒューマンウォーター」が生成する水の種類

電解水素水の他、肌に優しい酸性水や汚れや臭いを取り除いた浄水も生成します。

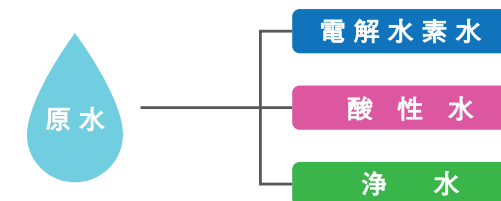

日々の生活にかかせない水。

飲み水だけではなく、**生活すべてに関係する水**をこれ一台で…。


HU-150は老若男女、すべての人々が日常で使う水を、手軽で簡単に生成できる電解水素水生成器です。安心して飲める水。料理がおいしくなる水。肌にやさしい水。健やかな水。家族みんなが日々のくらしの中で笑顔になれる。デザインと機能性をあわせもつヒューマンウォーターHU-150。

「ヒューマンウォーター」は、**管理医療機器**です。

効果・効能 | 胃腸症状の改善

胃もたれや、胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

指定管理医療機器製造販売認証番号: 第230AFBZX00004000号

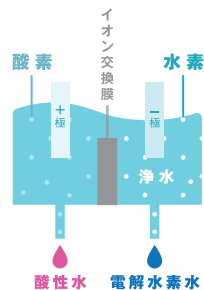

抜群の電解性能。

業務用・産業用に採用されている独自の電解技術「DEMシステム」を家庭用にも搭載。水量に応じ安定した電解能力を発揮します。また、定期的に電極を自動で洗浄する「ECOシステム(自動逆電洗浄)」で、電解力が長期間高いレベルで維持します。

節電 HPRシステム(Hybrid Power Regulator)

41.4円/月
(1kw/H:30円試算)

従来機種(HU-121)と比べ、
40% DOWN

0 待機時はバッテリー駆動に切り替え、
待機時の消費電力をほぼゼロに。

電解槽寿命

1500時間

従来機種(HU-121)と比べ、
180% UP



19物質の除去を実現。 進化した浄水力。

カートリッジの除去能力が従来製品(HU-121)の12物質(家庭用品品質表示法)除去から、プラス7物質(浄水器協会規格)の除去となり、合計19物質除去。浄水能力が大幅にアップしました。

活性炭フィルター 従来(当社比)より、小さい容量で、最大限の活性炭の効果を引き出します。

中空糸膜フィルター 0.1マイクロメートルの穴が空いたパイプ状の極細繊維が、高いろ過精度を実現します。

12 従来機種(HU-121)と比べ、
19 HU-121 → HU-150

簡単な操作性

ユニバーサルデザインを追求し、どなたでも簡単に使える“使い心地”を実現。「電解水素水」「酸性水」「浄水」を3つのボタンのみで、簡単に選択が可能です。



コンパクトなボディ

従来製品(HU-121)に比べ重量がダウンし、高さも75%にダウン。お使いのキッチンに設置しやすいサイズに進化しました。

一目でわかるデザイン

イルミネーションバーを本体に配置することにより、電解水素水か浄水、酸性水かをひと目でわかりやすくしました。



長く快適に 使っていただくために。

OSGでは、製品を長く快適に使っていただくために定期的なメンテナンスを実施しています。カートリッジの交換や清掃など、定期的にスタッフが伺いして行うなど、50年以上に渡って徹底したアフターサービスを行なっています。



OSGコンシューマーセンター

0120-065-631

受付時間 | 平日9:00-18:00
(土・日・祝日は休み)

私たちOSGコーポレーションは、 世界唯一 機能水総合メーカーです。

OSGコーポレーションは、1970年創業の水関連機器総合メーカー。浄水器、電解水素水生成器、衛生管理機器など、「水」に関する様々な事業を展開しています。なかでも電解水素水分野では、家庭用だけでなく、有名ホテルやレストランなどの業務用から、飲料メーカーをはじめとする産業用まで幅広く開発・製造。ヒューマンウォーターには、長年の研究や実績で培われた技術を生かしています。

OSGコーポレーションの製品は、日本中の様々な施設で選ばれています。

〈 国内大手飲料水メーカー・製薬会社・教育機関・国立医療機関・スポーツ施設・公共交通機関・ホテル 〉

様々な場所でOSGコーポレーションの製品を導入いただいております。



成田国際空港 / 関西国際空港 / 東京都庁 / 東京都営地下鉄 / 早稲田大学 / 明治大学 / 加賀屋 / ホテルニューオータニ 等

●仕様

販売名		ヒューマンウォーター HU-150	ろ過流量(0.1MPa時)		4.0L/分		
電源		AC100V 2.0A 50/60Hz	使用可能な最小動水圧		0.1MPa		
消費電力		240W(最大) ※待機電力:0W(相当 ※注1)	浄水 (HUR-K)	ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布		
類別		機械器具 83 医療用物質生成器		浄水能力 ※注2	遊離残留塩素	(総ろ過水量) 12,000L	クロロホルム 7,000L
一般の名称		連続式電解水生成器			濁り	7,000L	プロモジクロロメタン 7,000L
医療機器認証番号		第230AFBZX00004000号(管理医療機器)			溶解性鉛	7,000L	ジブロモクロロメタン 7,000L
整水器本体	寸法	幅270mm×奥行130mm×高さ250mm			CAT(農薬)	7,000L	プロモホルム 7,000L
	重量	約5.2kg(満水時) 約4.8kg(乾燥時)			2-MIB(カビ臭)	7,000L	テトラクロロエチレン 7,000L
給水仕様		切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃し弁内蔵)		総トリハロメタン	7,000L	トリクロロエチレン 7,000L	
電解方式		連続式電解方式(流量センサ内蔵)		上記以外でろ過及び 除去できる物質 ※注3	鉄(微粒子状)	除去	四塩化炭素 7,000L
連続使用最高水温		35℃			アルミニウム(中性)	除去	ベンゼン 7,000L
連続使用最高水圧		0.5MPa ※但し、付属の切換コックを使用			ジェオスミン(カビ臭)	7,000L	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン 7,000L
			フェノール類		7,000L		
電解 (電解水素水選択時)	出水量	電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 ※浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水)		ろ材の交換時期の目安 ※注4	約12ヶ月(遊離残留塩素を基準とし、1日33L使用した場合) (除去対象物質によって交換時期は異なります。 また、使用水量、水質、水温によって交換時期の目安が短くなることがあります。)		
	吐水比率	電解水素水:酸性水 4:1					
	電解レベル	3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流(レベルチェンジ))計6段階					
	連続使用可能時間	約30分(標準)/約10分(レベル強、定電流(レベルチェンジ)モード設定時)					
	電極洗浄方式	電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄					
	電解槽寿命	1,500時間					
保護装置		電流ヒューズ ※基板上に実装					

- 注1： 定期的に充電を行う為、通常待機時の電力(放電時)の表記となります。
- 注2： 家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201:2019)にて規定された試験で除去率80%の値。濁りについてはろ過流量50%の値。
- 注3： 一般社団法人浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験で、除去率80%の値。
なお、鉄(微粒子状)アルミニウム(中性)については、浄水能力を規定しているものではありません。
- 注4： 本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要です。

Humanwater

ヒューマンウォーター HU-150

指定管理医療機器製造販売認証番号:第230AFBZX00004000号

本体価格：299,200 円 (税込)

交換用浄水カートリッジ〔HUR-K〕本体価格 15,510 円 (税込)

※標準取付工事以外で、特殊取り付けをする場合には、別途料金がかかりますのでご了承ください。



使用上のご注意

- 初めて飲用する場合、中性に近いpHで少量から飲用してください。電解水素水(アルカリイオン水)をお使いになる場合には次のことにご注意ください。※医薬品を生成水で併飲しないでください。
- ※腎臓に障害がある方は、飲用前に医師に相談してください。また、腎不全やカリウム排泄障害などの腎疾患の人は、生成水を飲用しないでください。※pH10以上は、飲用不可であり、直接飲用しないでください。
- ※飲用して身体に異常を感じた時、または飲用し続けても症状に改善がみられない時は、医師に相談してください。
- 酸性水をお使いになる場合には、次のことにご注意ください。
- ※肌の弱い方やアレルギー体質の方は使用前に医師にご相談ください。※酸性水を使用して肌に異常を感じた時は、使用を中止し医師にご相談ください。
- 必ず飲用適の水(水道水など)を使用してください。

OSGコンシューマーセンター 0120-065-631 受付時間 | 平日9:00-18:00(土・日・祝日は休み)

●製造販売元

世界唯一 機能水総合メーカー

株式会社 OSGコーポレーション

本社:大阪市北区天満1-26-3 OSG本社ビル TEL.06-6357-0101
東京営業本部:東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル7F TEL.03-5484-7550

<https://www.osg-nandemonet.co.jp/>

東証スタンダード市場上場

証券コード:6757



OSGウォーターテック川越工場



OSG



浄水部
協会会員



WQAアジア太平洋地域委員会



浄水部
協会会員



浄水部
協会会員



浄水部
協会会員



浄水部
協会会員



浄水部
協会会員



浄水部
協会会員



浄水部
協会会員



浄水部
協会会員