


定格・仕様

販売名	アルカリッチ NDX-501LM
電源	AC100V 2.0A 50/60Hz
消費電力	180W(最大) 約3.6W(待機時)
類別	機械器具 83 医療用物質生成器
一般名称/医療機器分類	連続式電解水生成器/クラスII
医療機器認証番号	228AFBZX00092000号 (管理医療機器)
電解器本体	寸法 幅335mm×奥行100mm×高さ240mm 重量 約3.6kg(満水時) 約3.2kg(乾燥時)
カートリッジ	寸法 幅89mm(最大径)×高さ282mm 重量 約1.2kg(満水時) 約0.8kg(乾燥時)
カラシ	寸法 幅60mm×奥行190mm×高さ310mm(取付高) 給水仕様 カラン(レバー水栓)のレバー操作による開閉(給水管接続)
給水器具・認証	自己認証製品 (NDX501-201609-01)
電解方式	連続式電解方式(陰極セレン・陽極チタン)
連続使用最大水道水圧	35℃ 0.5MPa(付属の減圧弁を必ず施工すること)
電解	吐出量 電解水素水 約3.2L/分 酸性水 約0.8L/分 (±10%) (付属の減圧弁施工時) ※浄水時 約3.2L/分 (±10%) (トップアップ側の吐水量) 吐出比率 電解水素水・酸性水 4:1 電解レベル 3段階(電解モード流量追従(標準)+定電流) 計6段階 連続使用可能時間 約30分(標準) 約10分(電解レベル3(高),定電流モード設定時) 電解洗浄 電解洗浄時間(5分)に応じた逆電流洗浄 電解寿命 1,200時間

製品寸法

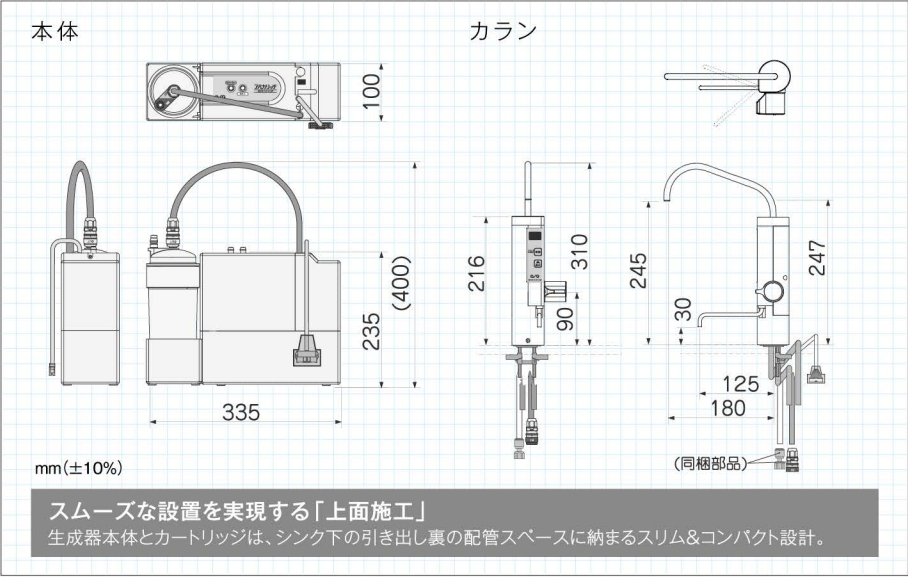

取扱店
販売店

ろ過流量	4.0L/分 ※0.1MPa時
最大給水圧	0.1MPa ※使用可能な最小給水圧
ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布
浄水	浄水能力 ※1 遊離残留塩素 経ろ過水量 12,000L 濁り 経ろ過水量 12,000L 溶解性鉛 経ろ過水量 6,000L CAT(農薬) 経ろ過水量 6,000L 2-MIB(カビ臭) 経ろ過水量 6,000L 総トリハロメタン 経ろ過水量 6,000L クロロホルム 経ろ過水量 6,000L ジブロモクロロメタン 経ろ過水量 6,000L ジクロロクロロメタン 経ろ過水量 6,000L トリクロロエチレン 経ろ過水量 6,000L トリクロロエチレン 経ろ過水量 6,000L PFOS及びPFOA 経ろ過水量 6,000L 銀(銀粒子状) 除去性能 アルミニウム(中性) 除去性能
カートリッジ (AR501K2)	浄水能力 ※2 5種の取換時期の目安 ※3 カルシウム濃度 約12ヶ月(遊離残留塩素) 除去対象物質によって交換時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって交換時期の目安が異なることがあります。 ※1 家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値、濁りについては50%の値。 ※2 一般社団法人浄水器協会(JWPA)で定められた試験基準(JWPA S基準)に準拠した試験で、除去率80%の値、なれ、銀(銀粒子状)アルミニウム(中性)については、浄水能力を測定しているものではありません。 ※3 本製品の性能を維持するために、1年1回のカートリッジ交換が必要です。

■使用上のご注意

初めて飲用する場合、中性に近いpHで少量から飲用してください。電解水素水(アルカリイオン水)をお使いになる場合には次のことにご注意ください。

- 医薬品を生成水で併飲しないでください。
- 腎臓に障害がある人は、飲用前に医師に相談してください。また腎不全やカリウム排泄障害などの腎疾患の人は、生成水を飲用しないでください。
- 医師の治療を受けている人や、身体に異常を感じている場合は、飲用前に医師に相談してください。
- pH10以上は飲用不可であり、直接飲用しないでください。
- 飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられないときは、医師に相談してください。

酸性水をお使いになる場合には次のことにご注意ください。

- 肌の弱い方やアレルギー体質の方は使用前に医師に相談してください。
- 酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、使用を中止し医師に相談してください。

必ず飲用適の水(安全な水道水など)を使用してください。

【本カタログについて】
○本カタログに記載されている内容は予告なく変更場合がございます。ご了承ください。
○製品の色等は印刷のため実際と若干異なる場合がございます。
○本カタログに掲載している取扱い等については、OSGまたは販売代理店までお問い合わせください。
OSG製品の最新情報はOSGのホームページでもご覧いただけます。
○本カタログの全てまたは一部を、他の印刷物やWeb上に複製転載することは固く禁じます。

お取り付けいただいたその日から
末永いお付き合いが始まります。

OSG コンシューマセンター

0120-065-631
受付時間:平日9:00~18:00(土・日・祝日は休み)

<https://www.osg-nandemonet.co.jp/>

OSGコーポレーション 検索

■製造販売元

株式会社 OSGコーポレーション

本社 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 (OSG本社ビル)
TEL:06-6357-0101

営業本部 〒104-6205 東京都中央区晴海1-8-12 晴海アライアントリクスア
オフィス5階
TEL:03-6852-7550



2025年4月現在

UNDER SINK STYLE

爽やかな暮らしを選ぶ水、
水素たっぷり電解水素水

アルカリッチ
NDX-501UM

指定管理医療機器製造販売認証番号
第228AFBZX00092000号



飲料・調理・洗顔にいたるまで、家族の暮らしに寄り添う電解水素水。

「電解水素水」のスマートスタイル アンダーシンク型生成器

1 常に安定したpHを維持
使いやすさにこだわった
マルチレバー

2 安心の衛生管理
高い性能を永く維持する
自動洗浄機能付き

カルシウム等の電解槽内に析出したミネラル分の洗浄を自動的に行い、電極板に付着しづらくするとともに、電解レベルを保ちます。

3 全国どこでも安定した
電解水素水を生成する
6段階の電解調整機能

4 一目でわかるから安心
カートリッジ交換
お知らせ機能

カートリッジ交換時期をシグナルランプがお知らせ。交換時期になると、シグナルランプが赤色に変わり、どなたでも一目でわかります。

5 フンタッチで
楽々カートリッジ交換

シンク下のカートリッジ交換は、高齢者や女性にとっては大きなストレスに。本製品はカートリッジを本体から独立、さらに接続先にはカブラを使用しているためワンタッチで工具がなくても交換可能です。

6 毎日の水で健康を促進
管理医療機器認証

効果・効能/胃腸症状の改善
※胃腸症状の改善とは、胃もたれや胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

指定管理医療機器製造販売認証番号
第228AFBZX00092000号


アルカリッチ (NDX-501LM)
本体価格 327,800 円(消費税込)
交換用浄水カートリッジ (AR501K2) 本体価格 21,450 円(消費税込)

今までにない生まれ変わったアンダーシンクスタイル。
コンパクトで収納スペースを選びません。



これまで収まらなかったスペースにも収まる「スリム&コンパクト」キッチン周りのスペースは有効に使いたい。そんな声にお応えしたスリム設計。本体の大きさは薄型でとてもコンパクト、置き場所を選びません。これまで諦めていた、引き出しコンテナ収納タイプのキッチンにも引き込台奥の配管スペースに収まり取り付けが可能となりました。

環境性と使いやすさを考えたら、この形が正解でした。

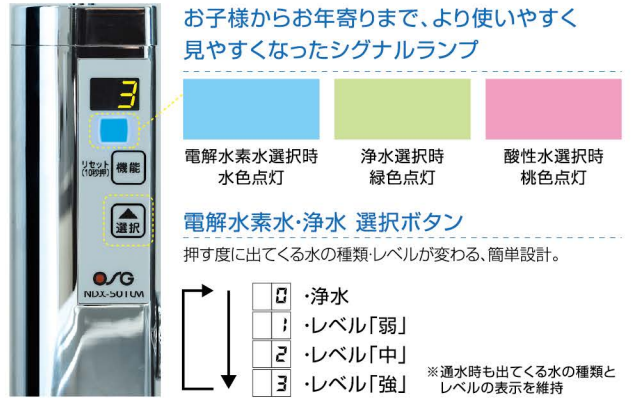


浄水 従来の12物質からさらに3つの物質を浄化。
より進化した高性能なカートリッジを搭載。

高性能なカートリッジで、より多くの不純物を取り除いた安心な水だから、赤ちゃんのミルクにもお使いいただけます。また薬の服用にもご利用いただけます。

遊離残留塩素	プロモジクロロメタン
濁り	ジブロモクロロメタン
溶解性鉛	プロモホルム
CAT(農薬)	テトラクロロエチレン
2-MIB(カビ臭)	トリクロロエチレン
総トリハロメタン	クロロホルム
PFOS及びPFOA	銀(銀粒子状)
アルミニウム(中性)	

電解水素水 電気分解で2種類の水を生成

水道水から塩素など不純物を取り除いた「浄水」を電気分解し、マイナス極にできるのが「電解水素水」。胃腸にやさしいお水です。

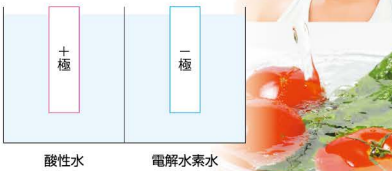

酸性水 電気分解されたもうひとつの水の魅力

電気分解によりプラス極側で生成されるのが酸性水です。洗顔や洗い物にお使いいただけます。

お料理にも おいしい料理に欠かせない、おいしい水。

ひと手間を惜しまないことが、おいしい料理の秘訣であるように、水選びを惜しまないことは、元気で快適な毎日過ごすための秘訣です。ご飯を炊く時やお茶を入れる時、素材の持ち味を引き出してくれるアルカリ性の電解水素水を使えば、おいさがぐんとアップ。煮物に使えば、ふっくら柔らかく仕上がります。

